

Phonak Audéo™ B-Direct Wireless-Zubehör

Produktinformation



Phonak präsentiert Audéo™ B-Direct, das neue Modell der erfolgreichen RIC-Hörgerätefamilie für leichtgradige bis starke Hörverluste. Mit Audéo B-Direct wird das Phonak Portfolio um eine Lösung erweitert, die die Vorteile der Phonak Belong™ Technologie nutzt und umfassende direkte Konnektivität bietet. Audéo B-Direct macht das Leben Ihrer Kunden leichter, denn es ist das erste Hörgerät im Wireless-Segment, das universell kompatibel ist. Diese neuen Hörgeräte können mit jedem Mobiltelefon* und Fernseher drahtlos verbunden werden.

*mit Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren Bluetooth-Telefonen

TV Connector – Der benutzerfreundliche Streamer zum Fernsehen und Musik hören



Der **TV Connector** ist die Schnittstelle zu TV-Geräten und anderen Audioquellen und wird drahtlos mit Phonak Audéo B-Direct Hörgeräten verbunden. Als Audio-Streamer lässt er sich leicht installieren und nutzen. Dank der AirStream™ Technologie bietet er herausragende Klangqualität in Stereo. Der TV Connector kann Audiosignale über eine Distanz von bis zu 15 Metern an eine unbegrenzte Anzahl von verbundenen Zuhörern übertragen.


Funktionen

- Streaming an beide Hörgeräte in Stereo-Klangqualität
- AirStream Technologie bietet bessere Klangqualität, minimale Übertragungsverzögerung und einfachere Anbindung
- Mit nur einem Tastendruck werden alle kompatiblen Hörgeräte innerhalb der Reichweite verbunden - ohne am Hörgerät etwas einstellen zu müssen
- Zeitgleiches Streaming an eine unbegrenzte Anzahl von gleichzeitigen Nutzern
- Unauffällige Anbringung hinter dem Fernseher möglich

Kompatibilität

- Der TV Connector ist nur mit Phonak Audéo B-Direct kompatibel. Alle anderen Wireless-Hörgeräte sind nicht kompatibel.

Verwendung

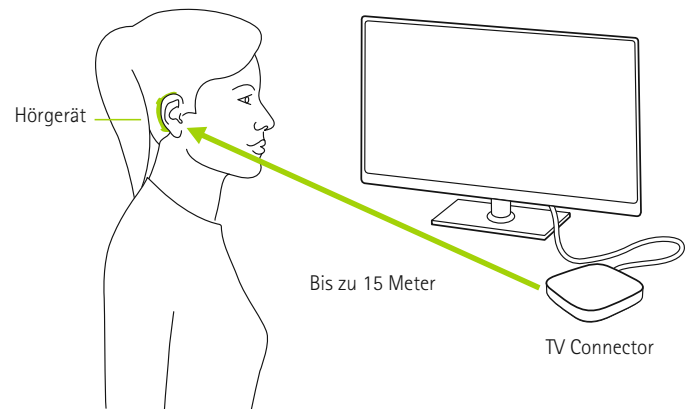

Anleitungsvideos zur Einrichtung und Nutzung des TV Connector finden Sie unter: www.phonakpro.com/TVConnector

Technische Daten



- 1 Verbinden-Taste
- 2 Statusanzeige (LED)
- 3 micro-USB Anschluss
- 4 Audioeingang für Toslink (digital optisch) oder 3,5 mm Klinkenstecker (analog)

Kleine Gehäusegröße (L: 63 mm x B: 63 mm x H:12 mm)

Phonak Remote – Die neue Fernsteuerungs-App



Phonak Remote ist die praktische Fernsteuerung, die direkt mit den Hörgeräten verbunden werden kann und die Einstellung der wichtigsten Hörerätaefunktionen ermöglicht. Mit dieser leicht anwendbaren Fernsteuerungs-App stellen Ihre Kunden ihre Höreräte ganz einfach ein – direkt über ihr Smartphone. Sie benötigen kein zusätzliches Gerät.

Funktionen

- Lautstärkeeinstellung der Höreräte entweder beide Seiten gemeinsam oder jede Seite separat
- Liste der verfügbaren Hörprogramme mit direkter Programmwahl
- Option zur Umbenennung der verfügbaren Hörprogramme in der App
- Auswahl der mit den Hörgeräten verbundenen, verfügbaren Audioquellen
- Einfache Anpassung der Streaming-Balance des Hörgeräts während des Streamings einer Audioquelle
- Separate Einstellung des Lautstärkepegels des Tinnitus Balance Noisers, sofern im Hörerät verfügbar
- Anzeige der durchschnittlichen Tragezeit der mit der App verbundenen Höreräte


Anleitungsvideos zur Einrichtung und Nutzung der Phonak Remote App auf Ihrem Telefon finden Sie unter: www.phonakpro.com/remoteapp




Separate Lautstärkeeinstellung auf jeder Seite



Streaming-Balance einer Audioübertragung

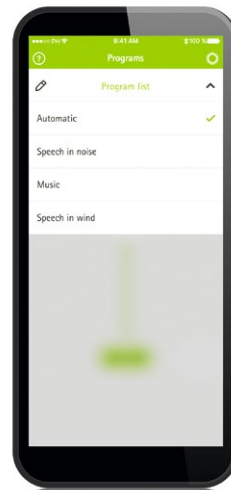

Programmwahl und Einstellungen

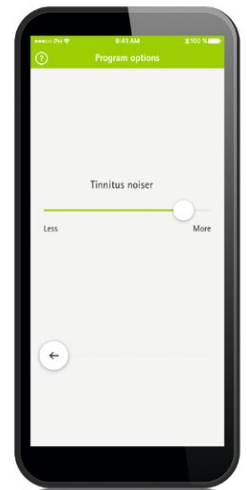

Lautstärkeeinstellung Tinnitus Balance Noiser

Kompatibilität

- Die Phonak Remote App ist nur mit Phonak Audéo B-Direct kompatibel. Alle anderen Wireless-Höreräte sind nicht kompatibel.
- Die Phonak Remote App kann auf Apple iPhones mit iOS ab 10.2 und auf Smartphones mit Google Android ab Version 6 genutzt werden.

Apple, das Apple-Logo, iPhone und iOS sind Marken von Apple Inc., registriert in den USA und in anderen Ländern.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android, Google Play und das Google-Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. **Life is on.**

www.phonak.de